Правила применения индикаторов СанИС

Чтобы результаты контроля были валидными, соблюдайте следующий алгоритм:

1. **Отделите индикатор** от листа по линии перфорации.
2. **На каждом индикаторе** поставьте номер контрольной точки, согласно схеме размещения.
3. **Разместите в контрольных точках** камеры стерилизатора, согласно схеме размещения.

   * *для удобства, индикатор можно закрепить на упаковке, на бирке, на биксе*

4. **Проведите цикл обеззараживания** в соответствии с выбранным режимом.
5. **После завершения цикла сравните цвет** индикаторной метки всех индикаторов с цветом элемента сравнения – индикаторная метка должна быть цвета элемента сравнения или темнее его (положительный результат)

   * если индикаторная метка хотя бы одного индикатора не достигла цвета элемента сравнения, условия обеззараживания в цикле не соблюдены - вся партия считается необеззараженной и подлежит повторной обработке с анализом причин сбоя (отрицательный результат).

6. **При положительном результате** индикаторы вклеить в журнал формы 520/у.

Схема размещения контрольных точек

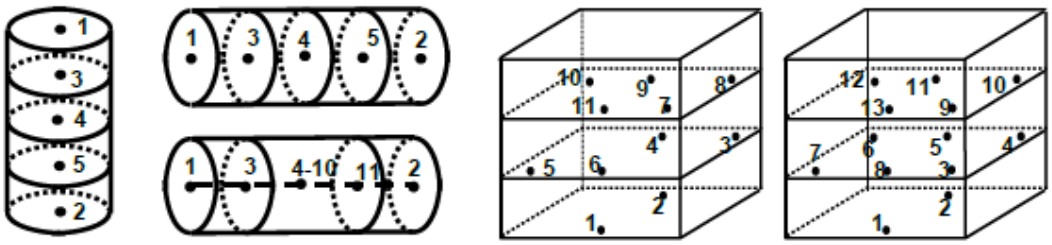


Рис.1. Расположение контрольных точек в камере паровых стерилизаторов.

Объем камеры парового стерилизатора, в литрах	Количество точек в стерилизационной камере, в которые закладываются индикаторы
до 100 включительно	5
свыше 100 - до 750 включительно	11
свыше 750	13